

NovoPen® 6))

Το NovoPen® 6 σας με μια ματιά



NovoPen® 6



Βελόνα μίας χρήσης




Φιαλίδιο Penfill®



Γρήγορος οδηγός χρήσης βήμα-προς-βήμα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ PENFILL® ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ

ΒΗΜΑ 1 Αφαιρέστε το καπάκι του στυλό

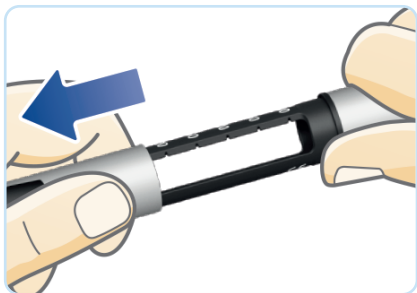


ΒΗΜΑ 2 Ξεβιδώστε την υποδοχή φιαλιδίου



ΒΗΜΑ 3 Τοποθετήστε το φιαλίδιο, με το άκρο με σπείρωμα πρώτο




ΒΗΜΑ 4 Περιστρέψτε ξανά το φιαλίδιο στην υποδοχή του μέχρι να ακούσετε ή να νιώσετε ένα κλικ

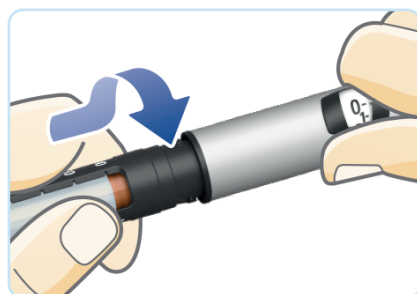

ΒΗΜΑ 5 Αφαιρέστε την χάρτινη καρτέλα από μια νέα βελόνα και σπρώξτε τη βελόνα κατευθείαν πάνω στο στυλό



ΒΗΜΑ 6 Αφαιρέστε το εξωτερικό και το εσωτερικό καπάκι της βελόνας. Κρατήστε το εξωτερικό καπάκι για την ασφαλή απόρριψη της βελόνας

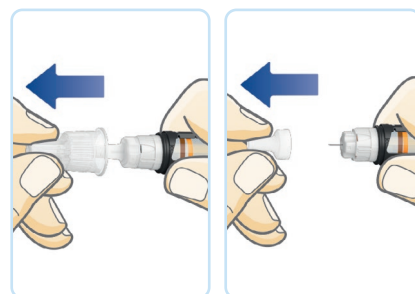

Για πλήρη εξήγηση του τρόπου χρήσης του NovoPen® 6 σας, διαβάστε τις Οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το στυλό σας. Παρακαλούμε γυρίστε για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.



ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ PENFILL®

ΒΗΜΑ 1 Τραβήξτε έξω το κουμπί δόσης και γυρίστε το για να επιλέξετε **2 μονάδες**.

ΒΗΜΑ 2 Πατήστε το κουμπί δόσης μέχρι ο μετρητής δόσης να δείξει **0** και να ευθυγραμμιστεί με τον δείκτη δόσης.

Η ινσουλίνη θα πρέπει να εκρέει από τη βελόνα

ΒΗΜΑ 3 Στη συνέχεια, ελέγξτε το παράθυρο ινσουλίνης για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ της κεφαλής της ράβδου του εμβόλου και του εμβόλου.

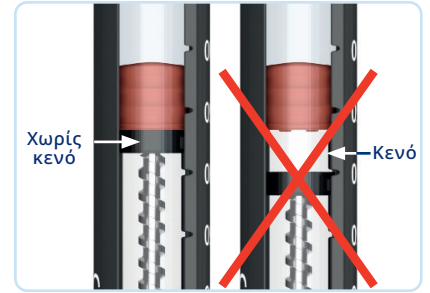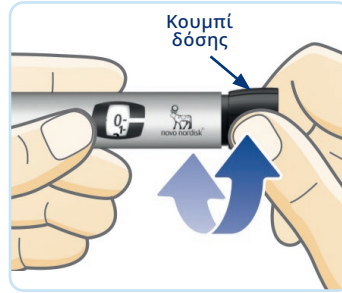

Εάν δεν εμφανιστεί ινσουλίνη ή υπάρχει κενό, επαναλάβετε τα βήματα 1-3 έως ότου το στυλό είναι έτοιμο για χρήση.



Εάν δεν ελέγξετε τη ροή της ινσουλίνης μπορεί να μην λάβετε την πλήρη δόση ινσουλίνης.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΑΣ

ΒΗΜΑ 1 Με τον μετρητή δόσης στο **0**, τραβήξτε έξω το κουμπί δόσης και γυρίστε το για να επιλέξετε τον αριθμό των μονάδων που θέλετε να εγχύσετε.



ΒΗΜΑ 2 Εισάγετε τη βελόνα και πατήστε το κουμπί δόσης έως ότου ο μετρητής δόσης δείξει **0**. Μετρήστε αργά έως το **6** πριν αφαιρέσετε τη βελόνα.



Αφαιρέστε και πετάξτε με ασφάλεια τη βελόνα και τοποθετήστε ξανά το καπάκι του στυλό.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς μπορώ να ξέρω αν έχει μείνει αρκετή ινσουλίνη για την επόμενη δόση μου;

Γυρίστε το κουμπί δόσης μέχρι να σταματήσει. Ο μετρητής δόσης θα δείξει είτε:

- **60** που σημαίνει ότι υπάρχουν **τουλάχιστον 60 μονάδες** στο φιαλίδιο, είτε
- έναν αριθμό μικρότερο του 60 που υποδεικνύει πόσες **ακριβώς** μονάδες έχουν απομείνει.

Εάν το φιαλίδιο δεν περιέχει αρκετή ινσουλίνη για την επόμενη δόση σας, αντικαταστήστε το με ένα νέο Penfill®

Μπορώ να αφαιρέσω και να αντικαταστήσω ένα μερικώς χρησιμοποιημένο φιαλίδιο Penfill®;

ΝΑΙ. Εάν αφαιρέσετε ένα φιαλίδιο Penfill® και στη συνέχεια το επιστρέψετε στο NovoPen® 6, **ΠΡΕΠΕΙ** να ελέγξετε εκ νέου τη ροή της ινσουλίνης όπως φαίνεται παραπάνω.

Γιατί είναι χαλαρή η ράβδος του εμβόλου;

Εάν δεν υπάρχει Penfill® στο στυλό, η ράβδος του εμβόλου μπορεί να κινείται μπρος-πίσω. **Αυτό είναι φυσιολογικό.**

ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



Επισκεφθείτε το Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών NovoCare® για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ινσουλίνη και βοηθητικό υλικό σχετικά με το NovoPen® 6, συμπεριλαμβανομένων βίντεο σχετικά με τον τρόπο χρήσης - www.novocare.com.au



Ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης του στυλό σας ή τεχνικά ζητήματα; Καλέστε τις Ιατρικές Πληροφορίες της Novo Nordisk - **1800 668 626**

NovoPen® 6

Novo Nordisk Pharmaceuticals Pty Ltd. Level 10, 118 Mount Street, North Sydney NSW 2060.
ABN 40 002 879 996. Novo Nordisk Medical Information (Australia) 1800 668 626. www.novonordisk.com.au.
© Σήμα κατατεθέν της Novo Nordisk A/S. NON00Y0148. AU24NP600013. Αύγουστος 2024.

