


# NovoPen® 6))

## NovoPen® 6 部件一览



### NovoPen® 6

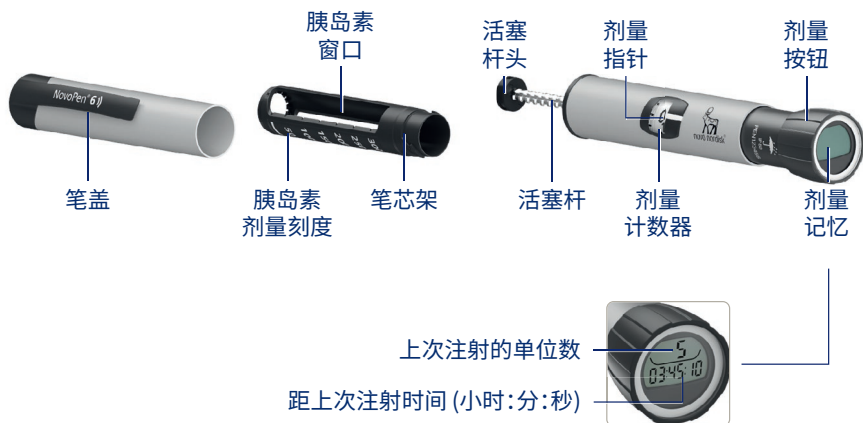

### 一次性针头




### Penfill® 笔芯




## 使用步骤简明指南

### 插入PENFILL® 笔芯并安装针头


#### 第1步 取下笔盖

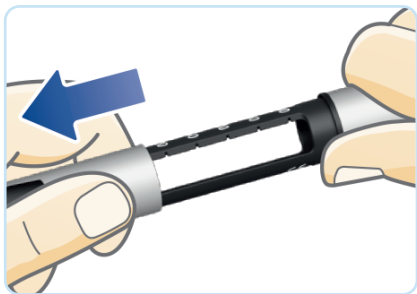


#### 第2步 旋下笔芯架

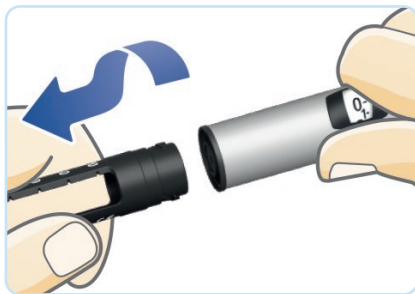


#### 第3步 插入笔芯, 螺纹端先入

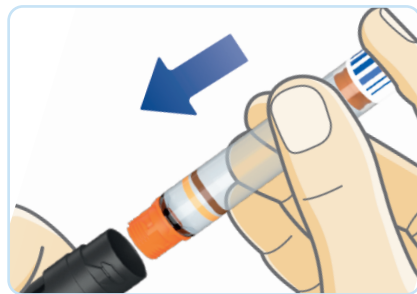


#### 第4步 将笔芯架旋回原处, 直到听见或感觉到咔嚓一声

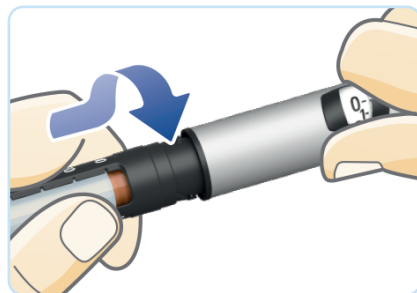

#### 第5步 取下新针头上的纸片, 将针头直接推到诺和笔上

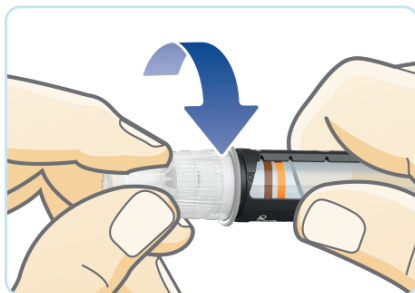

#### 第6步 取下针头外盖及内盖, 保留外盖用于安全丢弃针头

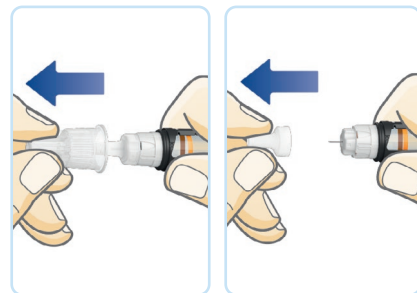

有关如何使用 NovoPen® 6 的详细介绍, 请阅读随附的使用说明。  
请翻页查看重要的安全信息。

## 插入PENFILL® 笔芯后, 请务必测试胰岛素流量


**第1步** 拉出剂量按钮, 转动选择**2个单位**。

**第2步** 按下剂量按钮, 直到剂量计数器显示**0**并与剂量指针对齐。

**针头应该有胰岛素喷出。**

**第3步** 然后检查胰岛素窗口, 确保活塞杆头与活塞之间没有空隙。

如果胰岛素没有喷出**或有空隙**, 重复1至3步, 直到诺和笔可以使用为止。

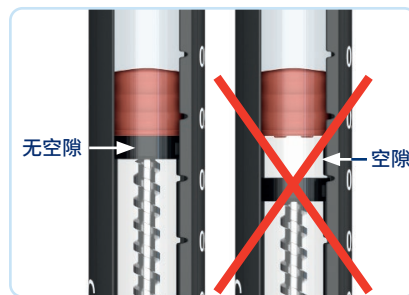

**如果不检查胰岛素流量, 您注入的胰岛素剂量可能不足。**

## 注射胰岛素

**第1步** 剂量计数器位于**0**时, 拉出剂量按钮, 转动选择您要注射的单位数。



**第2步** 插入针头, 按下剂量按钮, 直到剂量计数器显示**0**。慢慢数到**6**, 然后拔针。



**安全地拔出并丢弃针头, 然后盖回笔盖。**

## 常见问题解答

**我如何知道胰岛素的剩余量是否足够下次用药?**

**转动剂量按钮直至停止。** 剂量计数器将会显示以下两种情况之一:

- **60** 表示笔芯内**至少有60个单位**, 或
- 小于60的数字表示**确切**的剩余单位。

如果笔芯里剩余的胰岛素不足下一次剂量, 请更换新的Penfill®。

**我可以取出和更换使用了部分药液的Penfill® 笔芯吗?**

**可以。** 如果您取出了一支Penfill® 笔芯, 然后再将它放回NovoPen® 6, 就**必须**重新测试胰岛素流量, 如上所示。

**活塞杆为什么是松的?**

如果笔内没有Penfill®, 活塞杆可能会前后移动。**这是正常现象。**

## 如需详细信息或支持



请前往NovoCare®患者支持计划, 获取有关胰岛素和NovoPen® 6的信息, 包括如何使用的视频系列 – [www.novocare.com.au](http://www.novocare.com.au)



不知道如何使用您的诺和笔, 或有任何技术问题? 请致电Novo Nordisk医疗信息 – **1800 668 626**

**NovoPen® 6**

Novo Nordisk Pharmaceuticals Pty Ltd. Level 10, 118 Mount Street, North Sydney NSW 2060.  
ABN 40 002 879 996. Novo Nordisk Medical Information (Australia) 1800 668 626. [www.novonordisk.com.au](http://www.novonordisk.com.au).  
© Novo Nordisk A/S的注册商标. NON00Y0148. AU24NP600015. 2024年8月。

