


NovoPen® 6))

NovoPen® 6 部件一覽



NovoPen® 6

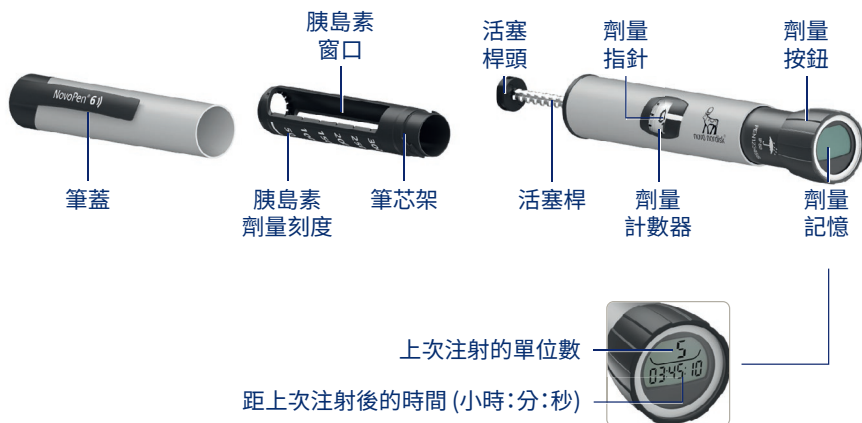

一次性針頭




Penfill® 筆芯




使用**步驟**簡明指南

插入PENFILL® 筆芯並安裝針頭

步驟 1 取下筆蓋

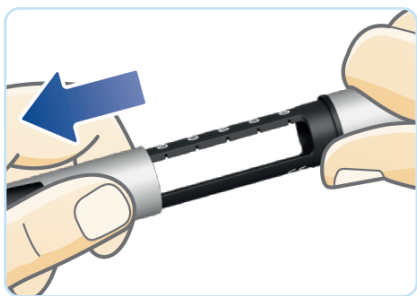


步驟 2 旋下筆芯架

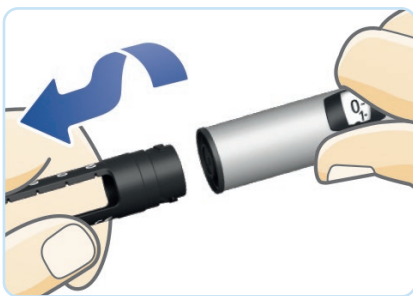


步驟 3 插筆芯，螺紋端先入




步驟 4 將筆芯架旋回原處，直到聽見或感覺到咔嚓一聲

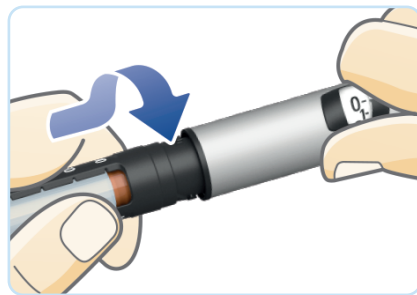

步驟 5 取下新針頭上的紙片，將針頭直接推到諾和筆上

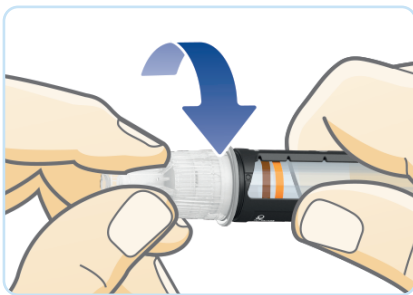

步驟 6 取下針頭外蓋及內蓋，保留外蓋用於安全丟棄針頭

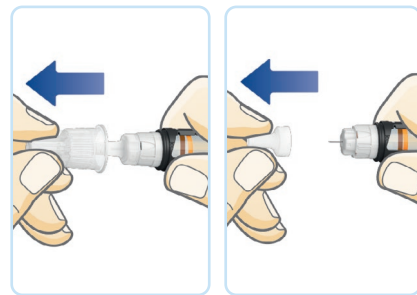

如何使用 NovoPen® 6 的完整解說，請參閱隨附的使用說明。
請翻頁閱讀重要安全資訊。

插入 PENFILL® 筆芯後一定要檢測胰島素流量


步驟 1 拉出劑量按鈕，轉動選擇**2**個單位。

步驟 2 按下劑量按鈕，直到劑量計數器顯示**0**並與劑量指針對齊。

針頭應該有胰島素噴出。

步驟 3 然後檢查胰島素窗口，確保活塞桿頭與活塞之間沒有空隙。

如果胰島素沒有噴出**或有空隙**，重複步驟 1-3，直到諾和筆可以使用為止。

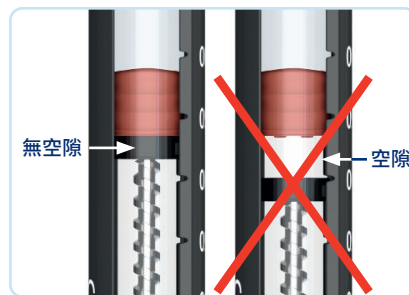

**如果不檢查胰島素流量，
您注入的胰島素劑量可能不足。**

注射胰島素

步驟 1 劑量計數器位於**0**時，拉出劑量按鈕，轉動選擇您要注射的單位數。



步驟 2 插入針頭，按下劑量按鈕，直到劑量計數器顯示**0**。慢慢數到**6**，然後拔針。



**安全地拔出
並丟棄針頭，
然後蓋回筆蓋。**

常見問題解答

我如何知道剩餘的胰島素劑量是否夠下一次用？

轉動劑量按鈕直到轉不動為止。劑量計數器將會顯示以下兩種情況之一：

- **60** 表示筆芯內**至少有60個單位**，或
- 小於60的數字表示**確切**的剩餘單位。

如果筆芯內剩餘的胰島素不夠下一次的劑量，請更換一隻新的Penfill®。

我可以取出和更換使用了部分藥液的Penfill®筆芯嗎？

可以。如果您取出了一支Penfill®筆芯，然後再將它放回NovoPen® 6，就**必須**重新測試胰島素流量，如上所示。

活塞桿為什麼是鬆的？

如果筆內沒有Penfill®，活塞桿可能會前後移動。**這是正常現象。**

如需詳細資訊或援助



請前往NovoCare®病患援助計劃，獲取有關胰島素和NovoPen® 6的資訊，包括如何使用的錄影系列片 – www.novocare.com.au



不知道如何使用您的諾和筆，或有各種技術問題嗎？請致電Novo Nordisk醫療資訊 – **1800 668 626**

NovoPen® 6)

Novo Nordisk Pharmaceuticals Pty Ltd. Level 10, 118 Mount Street, North Sydney NSW 2060.
ABN 40 002 879 996. Novo Nordisk Medical Information (Australia) 1800 668 626. www.novonordisk.com.au.
© Novo Nordisk A/S的註冊商標。NON00Y0148. AU24NP600016. 2024年8月。

